



MenisoftTM

Lentes de contacto de reemplazo mensual con el 72 % de hidrofilia

Material Menisoft : mipafilcon A II 2

Copolímero de DMMA/N-VP/MMA (grupo II b)

(DMMA : dimetilacrilamida)

72 % de hidrofilia, no iónico


Coloración : azul-verdoso

Dk : 34×10^{-11} (ISO)

Fina geometría bi-asférica

Dk/ e_c : 42.5×10^{-9} (ISO)

e_c : 0.08 mm para -3.00 D

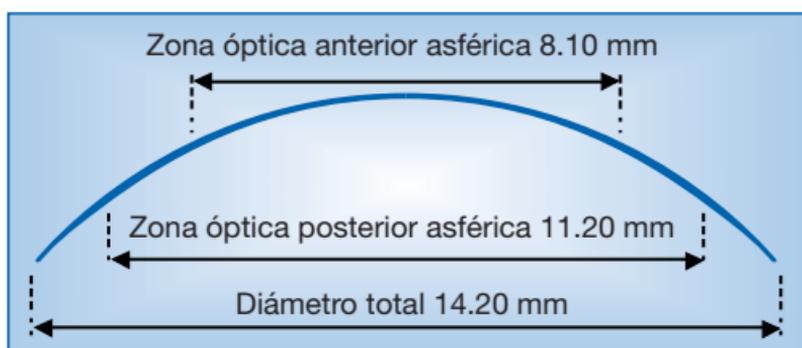

Proceso original de fabricación de alta calidad de moldeado y torneado.

Parámetros

\varnothing_T : 14.20 mm

r_0 : 8.60 mm

F'v : -0.25 a -6.00 D pasos 0.25 D,

-6.50 a -10.00 D pasos 0.50 D

Facilidad en la adaptación

Radio y diámetro único.

Seleccionar sólo la potencia refractiva.

Esperar 15 min antes de valorar la movilidad.

Indicaciones

Las lentes de contacto **MENISOFT** están diseñadas para uso diario, para la corrección de ametropías refractivas con un régimen de reemplazo mensual.

Cuidado de las lentes

Las lentes deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con una solución multiusos o con un sistema de peróxido de hidrógeno.

Empaquetado



Caja de 3 lentes de contacto MENISOFT

Cada lente de contacto MENISOFT estéril está empaquetada en solución salina estéril en un blister individual diseñado para mantener la esterilidad. Cada blíster está marcado con la potencia de la lente, nº lote ... cada caja contiene 3 lentes.

Fabricante : **Menicon Co., Ltd.** Nagoya Japan

Para cualquier información :

Menicon España

Mallorca 277
08037 Barcelona
TEL +93 272 13 69
FAX +93 272 13 71
menicon@wanadoo.es

Menicon Europe

104 rue Martre
Clichy F- 92110
TEL + 33 (0)1 41 40 19 00
FAX + 33 (0)1 41 40 19 20
www.menicon-europe.com