

# Comfort Progressive Inverse Art.-Nr. 1257

Simultan: Zentral Nähe

## Material:

- Z**
- Dk: 163
  - UV Filter
  - Handlingstint eisblau

- EX**
- Dk: 64
  - Handlingstint eisblau

## Nutzungszeitraum:

Tausch nach 18 Monaten, ideal nach 12 Monaten

## Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure  
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



## Eigenschaften:

- **Zentral Nähe**
- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung


## Vorteile:

- ▶ **Außergewöhnlich hohe Ansprüche im Nahbereich**
- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbessertes Tränen-austausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden

## Design:

### Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung (identisch zur Comfort)

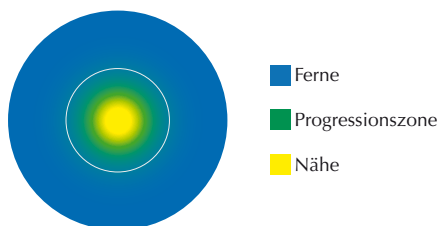

### Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv – zentral: Nahzone (identisch zur Omni Progressive Inverse)
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

## Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	<b>10,60</b>	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

## Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung