

# Omni FT Art.-Nr. 1283

fronttorisch

## Material:

- Z**
- Dk: 163
  - UV Filter
  - Handlingstint eisblau

- EX**
- Dk: 64
  - Handlingstint eisblau

## Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

## Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure  
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



## Eigenschaften:

- Prisma von 1,00 bis 2,50 wählbar
- Fronttorus


## Vorteile:

- ▶ Optimierung der Stabilisation
- ▶ Wenn rotationssymmetrische Rückfläche und Korrektur des Zylinders erforderlich ist

## Design:

### Rückfläche

- Sphärische optische Zone, asphärische Peripherie

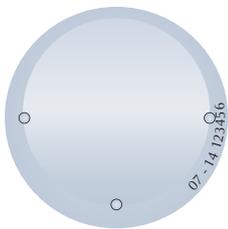

### Vorderfläche

- Torisch, zur Korrektur astigmatischer Restfehler
- Prismenballast für stabile Zylinderkorrektion (Standard 1,50 pdpt)
- 3 Punktgravuren (0° / 180° / 270°) zur leichten Beurteilung der Stabilisation
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

## Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

## Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Wirkung Cyl (dpt)	Zylinderachse (°)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	-0,75 bis -2,00 in 0,25 mm Abstufung	0° bis 180° in 1° Abstufung

Prisma (pdpt)	Durchmesser (mm)
1,00 bis 2,50 in 0,50 pdpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung